

半自动吸头装盒机



将繁杂的操作自动化



ATI-96EP



ATI-96EP ◆◆◆◆◆◆◆◆

将繁杂的操作自动化
小型台式半自动吸头装载机

产品性能

● 半自动化处理

采用多重检测剔除重叠的吸头

无需人工介入，避免对吸头的污染

一次可摆放1个盒架（中途需要更换盒架），摆满一盒约90秒

● 利用吸头开口部装载，保护吸头表面薄膜


● 大容量吸头料斗

可一次性投入20 μ L的吸头2000支（其他容量的可定制）


① 吸头收纳盒

② 吸头出口

③ 吸头架台

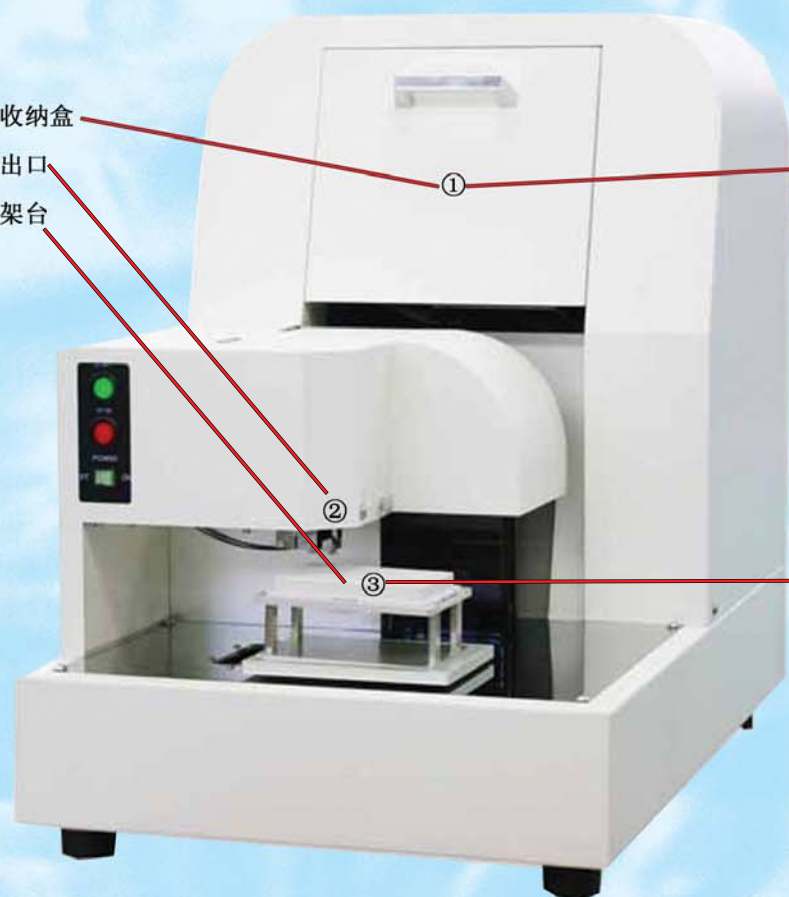

-吸头装填口

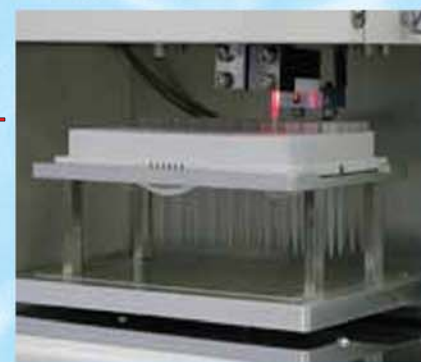

吸头架台

产品规格

型号	ATI-96EP
吸头架	20 μ l 96孔吸头架台(12 \times 8)
处理能力	(96支)1盒/90秒
外形尺寸	425 (W) \times 650 (D) \times 575mm (H)
重量	约30kg
电源	AC100, 60VA